



A close-up photograph of a multi-head centrifuge rotor. The rotor is black and has several white, rectangular heads attached to it. A red scale is visible on the rotor, with numbers 16, 17, and 18. The text "centrífuga multi cabezal alta velocidad nahita-blue" is overlaid on the image.

centrífuga
multi cabezal
alta velocidad
nahita-blue

centrífuga multizabazal, alta velocidad

Modelo 2624/2

Esta centrífuga que alcanza hasta las 15000rpm está especialmente indicada para su uso en diversos campos como biología, veterinaria, química, ingeniería genética o inmunología. Gracias a los múltiples cabezales (no incluidos) con los que puede ser utilizada ofrece una gran versatilidad de uso, convirtiéndose en un elemento indispensable en los trabajos de rutina del laboratorio.


especificaciones técnicas

Referencia	52624002
Cabezales	Angulares no incluidos
Velocidad máxima	15000 rpm*
FCR máxima	20375g*
Temporizador	1-99 minutos
Alimentación	230V, 50Hz-60Hz
Dimensiones	36X28X26 cm
Peso	15 Kg

* Ver tabla de cabezales



centrífuga multizabecal alta velocidad: **Modelo 2624/2**

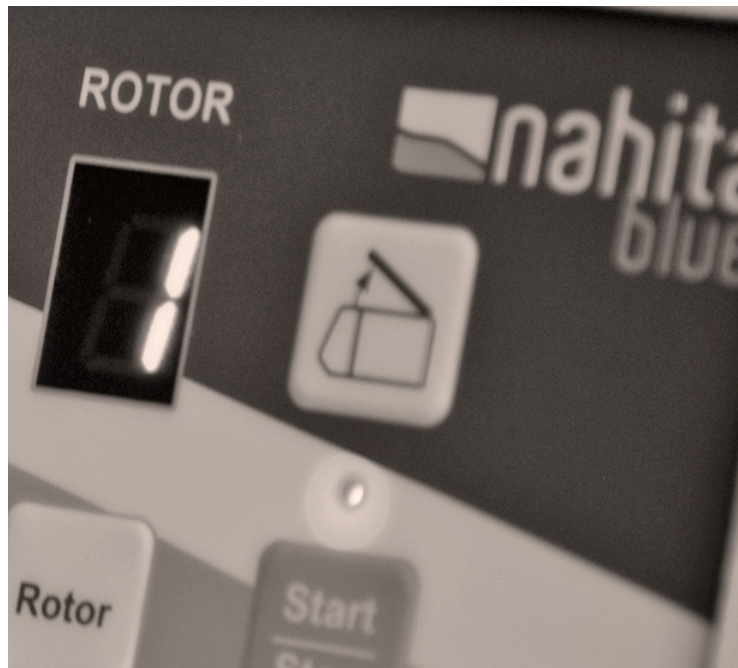

[01] Especialmente indicadas para protocolos que requieren centrifugaciones a una elevada FCR.

[02] Es un equipo de configuración robusta y resistente que presenta una carcasa de acero pintado.

[03] Dispone de un sistema de suspensión elástica del motor, lo que garantiza un suave funcionamiento, silencioso y sin vibraciones.

[04] Dispone de cierre electromagnético de seguridad que permite un trabajo seguro con el equipo. Además, presenta un mecanismo de apertura manual en caso de fallo de corriente o del sistema de apertura.

[05] Tapa con mecanismo de suspensión para evitar posibles accidentes durante el cargado o vaciado de la centrífuga.

[06] La cuba presenta un sistema de ventilación auxiliar que ayuda a prevenir el sobrecalentamiento excesivo y el deterioro de las muestras a centrifugar.

[07] Su motor de inducción sin escobillas hace que este equipo esté libre de mantenimiento periódico.

[08] Dispone un control digital de parámetros con una doble pantalla de LED

centrífuga multibrazo, alta velocidad

centrífuga
multibrazo
alta velocidad
modelo 2624/2
PANEL DE MANDOS



centrífuga multizabecal, alta velocidad

centrífuga
multicabecal
alta velocidad
partes equipo



centrífuga
multicabecal
alta velocidad
partes equipo
trasera



centrífuga multizabecal, alta velocidad

centrífuga multicabezal alta velocidad: diferentes cabezales

Para poder adecuarse a las diferentes necesidades del usuario, el equipo tiene a su disposición 5 cabezales angulares, de fácil instalación, que se suministran por separado y no están incluidos con el equipo. Además, la centrífuga dispone de un sistema que relaciona las rpm/g en función del número de rotor que se desee utilizar.

Referencia	Descripción
92624001	nº 1: Tubos 1.5/2.2mL x 24 Máx. 15000rpm, 20375g
92624002	nº 2: Capilar hematocrito x 24Máx. 12000rpm, 15455g
92624003	nº 3:Tubos 5mL x 10 Máx. 13500rpm, 12920g
92624004	nº 4: Tubos PCR (0.2x8x4cm) Máx. 14800rpm, 16200g
92624005	nº 5: Tubos 0.5mL x 36 Máx. 13500rpm, 13250g

Referencia 92624001
Tubos 1.5/2.2mL x 24 Máx. 15000rpm, 20375g



Referencia 92624002
Capilar hematocrito x 24Máx. 12000rpm, 15455g



