

baños de ultrasonidos
digitales
con calefacción

baños de ultrasonidos NAHITA

BAÑOS de ULTRASONIDOS DIGITALES con CALEFACCIÓN



Los baños de ultrasonidos le permiten la limpieza de todo tipo de instrumentos sin necesidad de desmontarlos, siendo apropiados para instrumental odontológico y quirúrgico, joyería, relojería, óptica en general, y pequeñas herramientas, así como para todo tipo de materiales como plástico, vidrio, porcelana, metal...

Fundamentalmente empleados para limpieza y desinfección, pueden tener más aplicaciones como pueden ser la degasificación de líquidos, la aceleración de procesos de suspensión de células y de reacciones químicas, emulsificación o la preparación de liposomas en cosmética y farmacia.

características técnicas

- Cuerpo metálico con asas laterales y cubeta en acero inoxidable [1]
- Incluye tapa [2] y rejilla [3]
- Control por microprocesador
- Frecuencia fija de 40 KHz
- Temporizador hasta 99 min.

[1] Cubeta de acero inoxidable.



[2] Tapa con asa incluida.





baños de ultrasonidos NAHITA

características técnicas

- Regulación de temperatura: ambiente-95° C
- Generador de ultrasonidos regulable 0-100 %
- Función DEGAS para una rápida degasificación de líquidos
- Válvula de drenaje (modelos 626/10 y 626/20) [4]
- Ruedas de desplazamiento (modelo 626/20)
- Voltaje: 220-240 / 50 Hz

[3] Bandejas para baños incluidas.





[4] Válvula de drenaje.



Modelo 626/10, ref. 50626010


baños de ultrasonidos partes equipo

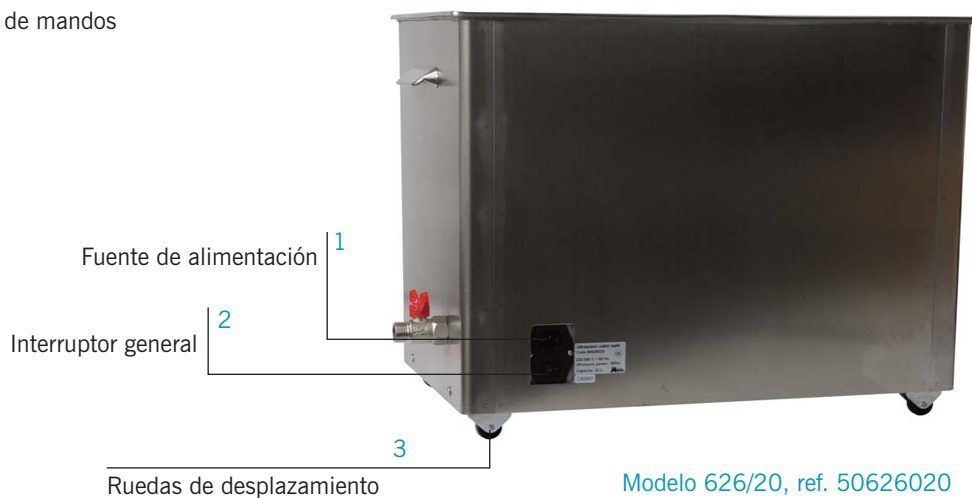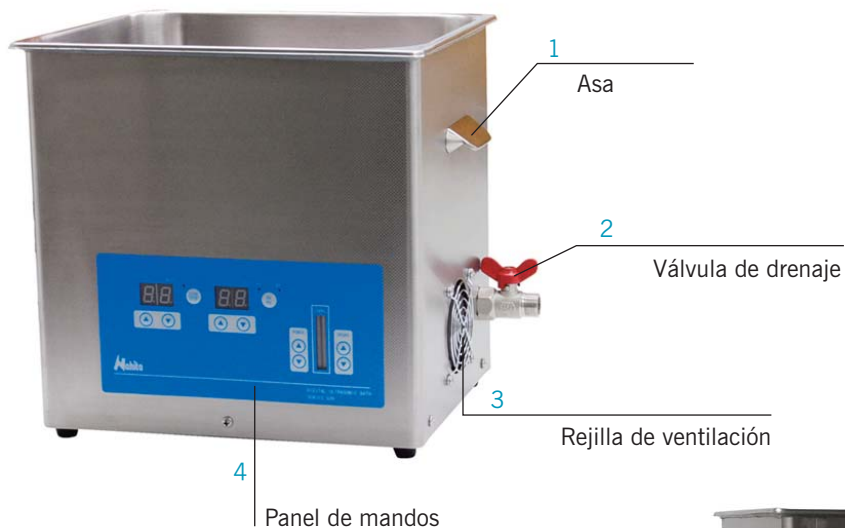

Modelo 626/20, ref. 50626020

baños de ultrasonidos

partes equipo

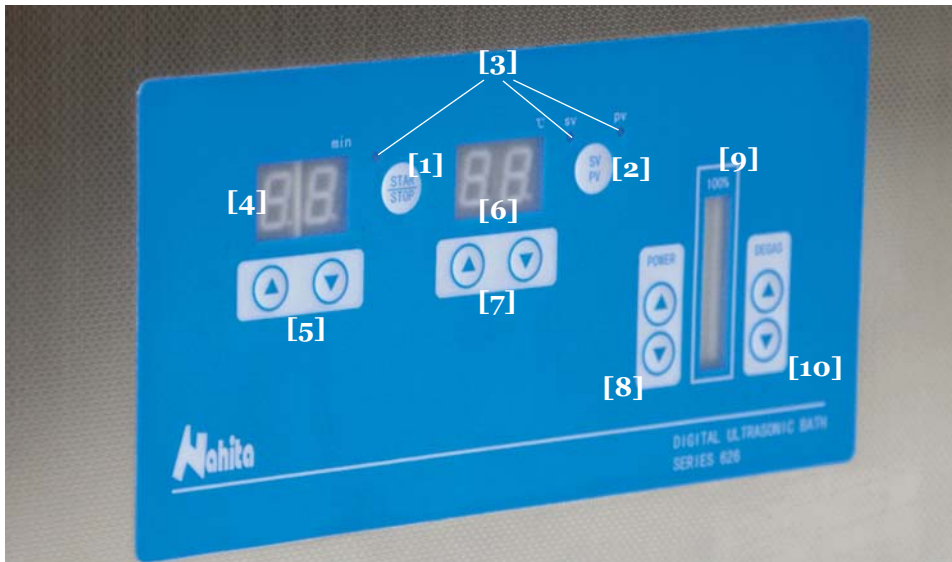

- [1]** Botón START / STOP
- [2]** Botón SV / PV
- [3]** Indicadores luminosos
- [4]** Indicador de tiempo
- [5]** Selectores de tiempo

- [6]** Indicador de temperatura
- [7]** Selectores de temperatura
- [8]** Selectores de potencia
- [9]** Indicador de potencia
- [10]** Selectores DEGAS

tabla características

baños de ultrasonidos NAHITA

Referencia	Modelo	Volumen	Medidas útiles	Potencia (W)
50626003	626/3	3L	235x135x100	120
50626006	626/6	6L	300x150x150	150
50626010	626/10	10L	300x250x150	260
50626020	626/20	20L	500x300x150	500

Detergente para baños de ultrasonido

Referencia	Envase
90600900	1L

